

テテオ はじめて歯みがき 乳歯ブラシ

STEP3 歯の本数の目安 **9本以上**

新習慣提案!!

プライマリー・オーラルケアの考えかたに基づき、乳歯がはえたらそろそろお口ケアを考えましょう。健康な口内環境作りは、歯がはえはじめた時点から開始することが重要です。お子さまが自分でブラシ形状のもので歯みがきトレーニングをはじめたら、保護者による仕上げみがき、そして歯みがきジェルやタブレットで上手にサポートしてあげましょう。お子さまが楽しく続けられるように、親子で一緒に丈夫な強い歯を作る習慣をはじめましょう。



東京歯科大学 小児歯科専門医
米津卓郎 先生

お母さんの仕上げみがきを嫌がらないよう、
お子さまの持つ歯ブラシも少しコシのある仕上げみがき用のものに近づけてあります。

使用上の注意

 ※ご使用前に必ずお読みください。

- 歯みがき以外の用途には使用させないでください。
- お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず**保護者の監督**のもとで使用させてください。
- 使用後はよく洗浄し、十分乾燥させてからお子さまの手の届かない清潔なところに保管してください。
- ブラシヘッド部を強く噛んで引っぱらないよう指導してください。毛が抜けたり、折れるなど、破損や変形のおそれがあります。
- 本品を使用中に異常を感じた場合は、歯科医に相談してください。




警告 歯ブラシをくわえたまま遊んだり、走ったりしないよう指導してください。誤ってのどを突くなど重大な事故の原因となります。

柄の材質	ポリプロピレン
ラバー部材質	水添型スチレンイソブレン共重合樹脂
毛の材質	ナイロン
毛の硬さ	やわらかめ
耐熱温度	80℃
消毒方法	煮沸× レンジ× 薬液×

コンビ株式会社

コンシューマープラザ
受付時間：10:00～17:00
(日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市
岩槻区約上新田271
TEL.(048)-797-1000
FAX.(048)-798-6109
※ホームページでのご案内
<http://www.combi.co.jp/cp/>
130956030

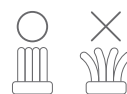

毛先がひらいたら取り替え
ましょう。



カバー：PET 台紙

MADE IN JAPAN