

## テオオ はじめて歯みがき 仕上げみがき用

### 使用上の注意

※ご使用前に必ずお読みください。  
本品使用中に歯ぐきがはれたり、出血  
がとまらなかつたり違和感のある場合  
は、使用を中止して歯科医に相談して  
ください。




**警告**  
この歯ブラシはお子さまには持  
たせないでください。誤つてのど  
を突くなど重大な事故の原因と  
なります。



毛先がひらい  
たら取り替え  
ましょう。

### 歯ブラシの持ちかた

エンピツを握るように持ち、軽い力で歯ぐきを傷つけないように、  
やさしくみがいてあげてください。

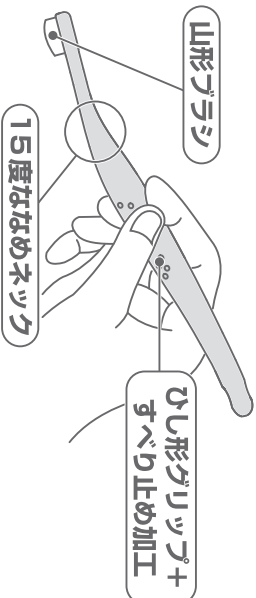

- やわらかい素材のブラシで、お子さまの歯ぐきを傷つけない。
- 歯と歯の間や、奥歯の噛みあわせ部分の溝までみがける山形ブラシ。
- お子さまのお口に適したサイズで不快感を与えないコンパクトヘッド。
- 虫歯になりやすい奥歯や前歯の裏側までみがきやすい15度ななめネット。
- 指にフィットし、すべりにくく効率よくブラッシングできる。



柄の材質	ポリプロピレン			
毛の材質	ナイロン 飽和ポリエステル樹脂			
毛の硬さ	やわらかめ			
耐熱温度	80℃			
消毒方法	煮沸 ×	レンジ ×	薬液 ×	

### コンビ株式会社

コンシューマープラザ  
受付時間：10：00～17：00  
(日祝日、年末年始を除く)  
〒339-0025 埼玉県さいたま市  
岩槻区釣上新田271  
TEL.(048)-797-1000  
FAX.(048)-798-6109  
※ホームページのご案内  
<http://www.combi.co.jp/cp/>



130966030

MADE IN JAPAN