

Combi

コンビ テテオ 授乳のお手本 病産院用哺乳びんセット

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

● 使用目的と注意事項

この製品は、お子さまの授乳や他の飲みものを与えるためのものです。それ以外の用途では使用しないでください。


この製品は、実際に病産院内で使用されているものと同じ仕様です。一般用の「テテオ 授乳のお手本 哺乳びん」との部品の互換性はありません。

■安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。

<p>△ 注意</p> <p>ヤケドやケガのおそれがあります。下記の点には十分ご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none">●お湯を入れる際、哺乳びんは熱くなります。清潔なタオルなどをお使いください。●お子さまのそばで調乳することはおやめください。●ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。●乳首は正しく確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと乳首がびんからはずれたり、飲みものが漏れることがあります。●落としたり、倒すなど衝撃を与えないでください。びんが割れるおそれがあります。●電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。	<ul style="list-style-type: none">●お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。●お子さまの手の届かないところに保管してください。●火のそばに置かないでください。変形・破損・割れの原因となります。●びんは、お使いになるたびに、傷・ひび割れ・亀裂・欠け・変形が生じていないことを確認してください。万一、生じている場合はすぐに使用を中止してください。びんが割れて、ヤケドやケガをするおそれがあります。特にびんの口元は、軽い衝撃でも割れたり、欠けることがあります。●フタをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフタだけがはずれ、哺乳びんが落下するおそれがあります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■必ず洗浄・消毒または除菌したものをお使いください。
はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄・消毒または除菌をしてください。

○ 各部のなまえ

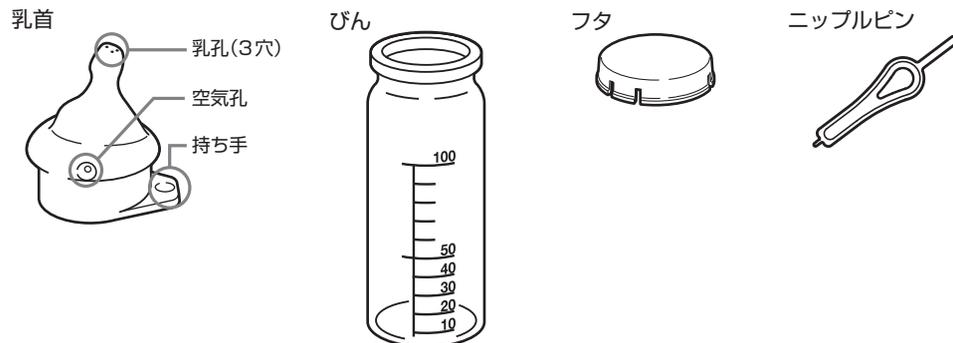

○ 洗浄の方法

- はじめてご使用になる前に、必ず洗浄・消毒または除菌をしてください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

- 授乳後は、すぐに分解してぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、コンビの哺乳びん用洗剤でよく洗浄してください。
- 乳首は、コンビの乳首専用の洗浄ブラシで内側を洗い、乳孔や空気孔はよくもみ洗いし、付属のニップルピンで手入れしてください。
- びんの内側は、コンビの哺乳びん専用ブラシでよく洗浄してください。

テテオ乳首専用ニップルピンの使いかた

乳孔や空気孔がつかまり密着すると乳首がとぶれたり、飲みにくくなる原因となります。洗浄と授乳の際に、付属のニップルピンで手入れしてください。

乳孔の場合	空気孔の場合
3つの乳孔に細いピン側を軽く回しながらやさしく差し込みます。	空気孔に太いピン側を軽く回しながらやさしく差し込みます。

△ 注意

- 授乳後はすぐに洗浄してください。カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。
- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がついたり、印刷がはがれるおそれがあります。
- アルカリ整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。
- ガラス製びんの口元は、軽い衝撃でも割れたり、欠けたりするおそれがあります。洗浄時は特に注意してください。
- 付属のニップルピンはお子さまの手の届かないところに保管してください。誤飲やケガの原因となります。

○ 消毒・除菌の方法

- 洗浄後は消毒または除菌をしてください。
- はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄・消毒または除菌をしてください。
- 煮沸・薬液・電子レンジによる消毒または除菌ができます。
- 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

煮沸消毒について

たっぷり水を入れた大きい鍋にびんを入れ、沸騰させます。びんの中に水が入るようにしてください。沸騰したら、その他の部品を入れ、2～3分間煮沸してください。

薬液消毒・除菌について

哺乳用品用の薬剤をお使いください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。薬剤の成分により、びんの印刷色に変色したり薄くなる場合があります。

電子レンジ除菌について

哺乳用品用の除菌用具をお使いください。詳しくは各用具の使用方法に従ってください。

※病産院内でのオートクレープご利用について

標準的な推奨条件は、121℃ 2気圧で、20分間です。過度な温度・圧力・時間は劣化を早めます。

△ 注意


- ガラス製びんを煮沸するときは、水の状態から入れてください。急激な温度変化は破損・割れの原因となります。
- 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く痛めます。
- 小さい鍋で煮沸をすると、各部品が鍋のふちに密着して変形するおそれがあります。
- 煮沸の際は、アルカリイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびんを、高温の状態から急冷しないでください。破損・割れの原因となります。
- 漂白はしないでください。びんが変色したり、印刷がはがれるおそれがあります。

○ 調乳の方法

- 調乳は、必ず清潔な手で行ってください。
- びんの目盛は、目安としてお使いください。精度が必要な場合は、別容器で計量してください。

- ① 必要量のミルクをびんに入れます。
- ② 1度沸騰させた70℃以上のお湯を、できあがり量の1/2～2/3ほど入れます。
- ③ ヤケドに注意してフタをし、清潔なタオルなどでくるんで、円を描くようによく振ってミルクを溶かします。
- ④ フタを取り、できあがり量まで70℃以上のお湯を加えます。
- ⑤ ヤケドに注意してフタをし、清潔なタオルなどでくるんで、さらによく溶かします。
- ⑥ 溶けたらびんの矢印部(右イラスト参照)を持ち、冷水の入った容器に入れて、授乳できる温度まで冷まします。このとき、びんの中に水が入らないよう、冷水は指より下にあてるようにします。
- ⑦ びんの外側に付いた水を、清潔なふきんなどでふき取ります。
- ⑧ フタを取り、ミルクをこぼさないように乳首を取り付けます。
(「乳首の取り付け方法」参照)

※フタを持たず、びんの矢印部を持ってください。

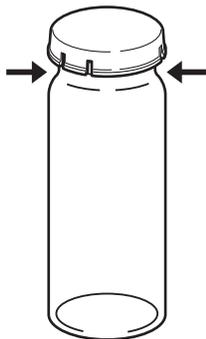

乳首の取り付け方法

調乳後、授乳適温まで冷ましてから乳首を取り付けてください。
乳首を取り付ける際は、ミルクをこぼさないようご注意ください。

- ① 片方の指で、持ち手の反対側をびんに押し付けるように押さえる
- ② 持ち手を引きながら乳首をびんにかぶせる



警告

電子レンジを使用して、哺乳びんで調乳用のお湯を沸かすことはおやめください。突沸現象(※)により、お湯が飛び散るおそれがあります。
※突沸現象:過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象

注意

- お湯を入れたときは、びんが高温になります。ヤケドに注意してください。
- お子さまのそばで調乳することはおやめください。ヤケドをするおそれがあります。
- びんを振る際、フタのすき間からミルクがこぼれ、ヤケドをするおそれがあります。
- フタをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフタがはずれ、哺乳びんが落下するおそれがあります。
- 乳首は正しく確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと乳首がはずれたり、ミルクが漏れて思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 哺乳びんを逆さにすると乳孔からミルクが出てきます。ご注意ください。
- 調乳時に沸騰しているお湯を使用し、急冷却するなど急激な温度差をびんに与えないでください。破損・割れの原因になります。
- 調乳したミルクを哺乳びんに入れたまま、電子レンジで再加熱しないでください。加熱ムラによりお子さまがヤケドをするおそれがあります。

○ 授乳の方法

- 調乳後はなるべく早めに授乳してください。

授乳適温の確認

腕の内側に哺乳びんをあてたりミルクを2～3滴たらして、やや温かく感じる程度の適温になっているか確認してください。

飲ませるときは

お子さまをだっこして、飲ませてください。

乳首の向き

乳首の持ち手が上になるように授乳してください。

授乳時間は

15～20分が目安です。母乳と同じ程度の時間で授乳することをおすすめします。



注意

- ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。ヤケドをするおそれがあります。
- 授乳前に、正しく乳首が取り付けられているか確認してください。取り付けが不完全ですと漏れや乳首がはずれる原因となります。

ワンポイント



- お子さまの上唇が巻き込まれず、はっきり見えるようにくわえていることを確認してください。
- 乳首や空気孔は材質の特性上、つまったり密着して機能なくなることがあります。授乳の際に付属のニップルピンで手入れて、つまったり密着したまま使用しないよう注意してください。

○ 乳首について



- お子さまは1つの乳首になじむと新しい乳首を嫌がる場合があります。この製品を2セット以上ご使用になるか、または一般用「テテオ 授乳のお手本 哺乳びん」との併用をおすすめします。
- このびんには、「テテオ 授乳のお手本 病産院用乳首」以外は取り付けできません。

注意

- お子さまの歯の状態やくわえかたによっては、乳首に傷・亀裂などが生じやすくなる場合があります。乳首は傷つくとやぶれることがありますので、小さな傷でも、使用を中止してください。
- 乳首は長時間直射日光にあてないでください。

一般用「テテオ 授乳のお手本 哺乳びん」(別売)について

- 一般用は形状、取り付けかたが異なるため、この製品との部品の互換性はありません。
- 乳首はSSサイズ、Sサイズ以外に、2・3ヵ月～18ヵ月まで使用できるMサイズがあります。
- 哺乳びんは160ml SSサイズ乳首付と240ml Mサイズ乳首付があります。外出時やお子さまの成長に応じて、ご使用ください。

コンビ株式会社

■公式ホームページ <http://www.combi.co.jp>
■公式オンラインショップ <http://www.combishop.jp>
■公式製品&育児情報サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間: 10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271

■総合受付 (各種ご相談) 窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 各種ご相談 / その他
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売 (相談) 窓口 部品購入のお問い合わせとご注文
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>